



Přečtěte si pozorně celý návod k použití, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky nebo potřebujete radu, zeptejte se svého lékaře.

Pokud u Vás dojde ke zhoršení příznaků nebo nedojde k žádnému zlepšení, musíte v každém případě vyhledat lékaře.

POSIFORLID® oční maska

Samozahrívající oční maska k léčbě zánětu okrajů víček (blefaritidu), funkčních poruch Meibomových žláz, ječného zrnu a chalazionu.

Oční maska POSIFORLID® přináší rychlou a dlouhodobou úlevu od potíží, které vznikají v důsledku nestabilního slzného filmu, jako jsou suché, unavené, pálící nebo nadměrně slzící oči.

1. KČEMU SE POSIFORLID® OČNÍ MASKA POUŽÍVÁ?

POSIFORLID® oční maska se používá k léčbě zánětu okrajů víček (blefaritidu), funkčních poruch Meibomových žláz, ječného zrnu a chalazionu.

Oční maska se aktivuje pomocí jednoduchého systému zlomení. Tím se asi po 1 minutě dosáhne určená teplota. Teplota zmrzlíčkuje krusty na okraji víčka a tým lze snadněji odstranit. Kromě toho zlepšuje teplo přívod krv a zméká maz ve Meibomových žlázách, takže jej lze při masárování očních víček vytlačit z mazových žláz.

POSIFORLID® oční maska přináší přirozenou ces-

tu rychlou a dlouhodobou úlevu od potíží, které vznikají v důsledku nestabilního slzného filmu,

jako jsou suché, unavené, pálící nebo nadměrně slzící oči.

Příznaky suchých očí mohou být:

- Podráždění očí
- Zčervenání očí
- pocit pichání nebo pálení očí
- pocit zrnek písku v očích
- Přesitlivost na světlo
- Proměnlivý zrak (po několika mrknutích se zrak přechodně zlepší)
- Zhoršení obtíží v určitých prostorách, například vlivem klimatizace nebo kouření
- Potíže při čtení nebo delší době před obrazovkou
- Nejasné vidění při čtení v noci
- Suché, unavené, pálící oči
- Obtíže při používání kontaktních čoček
- Obtíže se slezem nebo nadměrně slzící oči. Může se zdát zvláštní zmínit tyto příznaky v souvislosti se suchýma očima, ale když se slzný film příliš rychle odpáří, vytváří se v reakci na nové slzy, stejně jako například při jízdě na kole ve větru.

2. KDY BYSTE NEMĚLI POSIFORLID® OČNÍ MASKU POUŽÍVAT NEBO NA CO MUSÍTE PŘITOM BÝT ZVLÁŠTĚ OPATRNÍ?

- Při určitých formách ekzému: Vlhké teplo může zhoršovat určité typy ekzému. Když se obtíže s ekzémem zhorší, doporučujeme Vám obrátit se svého lékaře.

- Při zvýšeném nitročinném tlaku (glaukom) nesmí na oči působit příliš velký tlak. V takovém případě elasticík uzavírá příliš neutahujte nebo položte oční masku na oči bez použití elasticíku uzávěru.

- Absolvovali jste před méně jedním měsícem operaci šedého zákalu nebo glaukomu? Budete při masárování horních očních víček opatrní. Přes použití POSIFORLID® oční masky se nejprve poradte se svým činem lékařem.

- POSIFORLID® oční masku nepoužívejte, pokud zpozorujete, že oční maska netěsná nebo je poškozená.

Po asi 90 použitích se účinnost oční masky snižuje. Pro účinné oséření při obtížích je však zapotřebí správná teplota. Pokud zpozorujete, že oční maska vydává méně tepla, použijte novou oční masku. Používejte POSIFORLID® oční masku výhradně k popsaným účelům. **Zhoršily se Vám obtíže po několika dnech? Pak se obrátěte na svého lékaře.**

3. JAK SE MÁ POSIFORLID® OČNÍ MASKA POUŽÍVAT A JAK O NÍ PEČOVAT?

Používejte POSIFORLID® oční masku přesně tak, jak je popsáno dále.

Oční maska je připravena k použití, když je oranžový obsah tekutý. Jestliže má obsah ještě pevnou konzistenci, musíte oční masku vymout z pouzdra stiskem tláčka a 10 minut vyuvařovat ve vodě. Dopržte pokyny uvedené v odstavci „Vyuvařování po použití“.


Používejte tu oční masku v kombinaci s vatovými tampony, které dostanete v supermarketu nebo v drogerii. Pro každé oséření použijte nové a čisté tampony.

Před použitím


Než začnete s používáním podle bodu 4, musíte učinit následující:

- Umyjte si ruce.
- Zkontrolujte oční masku, zda není poškozená nebo nejvíce známky netěsnosti.
- Přes použitím POSIFORLID® oční masky odstraňte případné kontaktní čočky a oční makeup.

4. POUŽITÍ

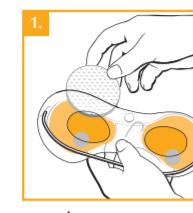

Navlhčete dva vatové tampony normální vodou z vodovodu. Nasuňte na každou stranu vlnkou vatový tampon nahoru na oční masku do otvoru tak, aby vata byla přesně před oválným otvorem. Zavřete tláčkem oční masky.

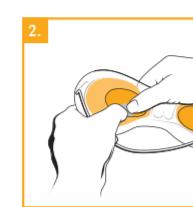


Pomocí jednoduchého systému zlomení oční masku aktivujte. Zlomení se provádí následovně: V oboru oranžových částech oční masky je kovový kotouček. Uchopte každý pevně oběma rukama a zkuste jej ohnout, resp. zlomit. Postup zlomení vyzvolí zvukovou vlnu, čímž tekutý oranžový obsah během několika sekund změní skupenství na pevné a tím vzniká teplo. Teplota činí asi 45 °C. Po cca 5-7 minutách teplota postupně klesá.



Položte oční masku otevřenou stranou na oči a zatahнete pásek okolo hlavy. Pomocí uzávěru lze pásek zkrátit, aby při jemném sedění. Nestahujte příliš pevně, oči nesmí být vystaveny příliš vysokému tlaku.



Po alespoň 5 minutách oční masku sejměte. Tato doba může být delší, avšak v žádnom případě kratší.

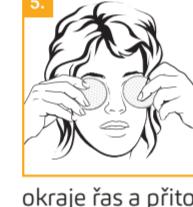

Čištění očních víček je důležitým krokem při ošetřování zánětu okrajů očních víček a poruch fungování Meibomových žláz. Odstraňte z oční masky vatové tampony a masírujte a čistěte si s nimi okrajem řas a přitom vatovými tampony jemně mněte oblast mezi řasami. Po vynaložení tlaku na spodní víčko se podívejte nahoru, a pře posunutí horního očního víčka se podívejte dolů. Položte ukazováček rovnoběžně s okrajem víčka do blízkosti řas. Působte na oční víčko tlakem ve směru oka. Tím odstraníte maz, takže se slzný film stabilizuje a obtíže ustoupí.

V případě chalazionu masírujte chalazion bezprostředně po použití oční masky. Působením tepla se maz zkapalní. Masírováním vytlačujte zkapalněný maz v malých množstvích s upanem mazové žlázy. Tím malý otok postupně zmizí.

Pokud máte ječné zrno, nemusíte je masírovat. Teplo oční masky urychlí zrání. Jakmile zrno praskne, obtíže zmizí. Po několika dnech většinou dojde k vynoření. Může se však také stát, že otok přetraví, ale již neboli. Později se zklidní a zapouzdí. Následně přejde v chalazion.

Vyuvařování po použití

Po použití je nutno oční masku 10 minut vyuvařovat v hrnci s velkým množstvím vařící vody (cca 2 litry) pro přípravu na další použití. Obsah oční masky se přitom opět zkapalní. Začněte měřit čas, až bude voda skutečně vařit. Pak po deset minut udržujte vodu v mírném varu, zdroj tepla nevyplňte.

Zamezte vyuvařování nasucho a poškození. Pečlivě sledujte dobu vyuvařování na kuchyňské minutce. Ke vkládání oční masky do vody a ke jejímu využití použijte cedník nebo vložku lžíci. Pouzdro nevyvařujte, protože by tím materiál ztvrdl. Použdro můžete čistit vlažnou mydlovou vodou.

Čemu je třeba se vynout

- Nepoužívejte oční masku bezprostředně po vyuvaření. Oční maska je pak ještě příliš horká a může způsobit popáleniny. Vyčkejte nejméně půl hodiny než oční maska dostatečně vychladne.
- Nezahřívejte oční masku v mikrovlnné troubě nebo přímo na plotence sporáku.
- Nevytahujte oční masku z hrnce s použitím ostřého předmětu, mohlo by dojít k jejímu poškození. Použijte raději cedník nebo plachou lžíci.
- Nenechávejte děti vyuvařovat oční masku bez dozoru dospělých.

• POSIFORLID® oční masku nepoužívejte, pokud zpozorujete, že je oční maska netěsná nebo poškozená. Pokud se Vám oranžový obsah přesto nenadále dostane do očí, na kůži nebo na oděv, vymožte jej několik minut pod vlažnou tekoucí vodou.

Dodavatel pro Českou republiku: URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10

Tel.: +420 295 560 468

e-mail: info@ursapharm.cz

www.ursapharm.cz

Dodavatel pro Slovensko:

URSAPHARM spol. s r.o.

Studená 5

821 04 Bratislava

telefon: 0911 902 509

e-mail: info@ursapharm.cz

www.ursapharm.sk

Dodavatel pro Polsko:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.

ul. Małarska 6, 05-092 Łomianki

Tel: 22 732 07 90, Faks: 22 732 07 99

e-mail: info@ursapharm.pl

www.ursapharm.pl

Výrobce (EU):

STANPHARMA B.V., Mgr. van Genkstraat 6,

4813 BL Breda, Nizozemsko

C E zdravotnický prostředek

Váš názor na nás výrobek je pro nás důležitý!

Těšíme se na Vaše podněty zaslávané poštou

nebo e-mailem.

Návod na použitie

Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie, nakolko obsahuje dôležité informácie pre vás.

Tento návod na použitie si odložte. Možno, že si ho budete musieť znova prečítať.

Opýtajte sa svojho lekára alebo lekárničku, ak potrebujete ďalšie informácie alebo rady.

Ak nedojde k zlepšeniu vášho stavu alebo v prípade zhoršenia vašich príznakov, v každom prípade vyhľadajte lekára.

POSIFORLID® maska na oči

Samozahrívacia maska na oči pri liečbe zápalov okrajov mihalníc (blefaritis), funkčných porúch (Meibomových) žláz na okraj mihalníc, tzv. očného jačmeňa a vnútorného jačmeňa.

POSIFORLID® maska na oči prináša rýchlu a trvalú úľavu pri ťažkostach v dôsledku nestabilného slzného povlaku, ako sú suché, unavené, páliace alebo nadmerne slzavé oči.

1. NAČO SA POUŽÍVA POSIFORLID® MASKA NA OCÍ?

POSIFORLID® maska na oči sa používa pre podporu liečenia zápalov okrajov mihalníc (blefaritis), funkčných porúch Meibomových žláz, tzv. očného jačmeňa a vnútorného jačmeňa. Maska na oči sa aktivuje pomocou jednoduchého systému na zlomenia.

Asi po 1 minúte dosiahne stanovenú teplotu.

Teplota zmrzlíčkuje chŕstny na okraj mihalníc, takže sa dajú ľahšie odstrániť. Teplota tokom tohto času zlepšuje prívod krv a zméká maz v Meibomových žlázach, takže sa pri masárovani mihalníc dá z mazových žláz vytlačiť.

Prilozte masku na oči a aktívajte jednoduchým kliknutím. Kliknutie uskutočníte nasledovne:

V oboch oranžových častiach masky na oči sa nachádzajú kovové diskys. Oba diskys držte pevne obidvomi rukami a

pokúste sa ich „ohnúť“, resp. „kliknúť“. Tento proces vyzvolí zvukovú vlnu, čímž tektúru oranžového obsahu nadobudne v priebehu niekoľkých sekúnd pevnú formu, takže vznikne teplo. Teplota je približne 45 °C. Po cca 5-7 minútach začne teplo postupne klesať.

Prilozte masku na oči s otvorenou stranou na oči a pretiahnite si prúžok cez hlavu. Pomočou užávania môžete prúžok skrátiť, až kým sa príjemne dotkne. Pr

• Nedovolte deťom, aby masku na oči vyuvarali bez dozoru dospelého človeka.
• Pomôcku POSIFORLID® maska na oči nepoužite, ak spozorujete, že maska je netesná alebo poškodená. Ak by sa oranžový obsah nečakane dostal do vašich očí alebo na vašu pokožku alebo odev, opachujte ho niekoľko minút vlažnou tečúcou vodou.

5. KTORÉ ĎALŠIE POKYNY K POUŽITIU BY SA MAL DODRŽIAVAT?

Radi vám poskytneme niekoľko tipov týkajúcich sa použitia:

1. Je možné, že pri prvom otvorení balenia vaša maska na oko je v tuhom stave. V tomto prípade sa nepokújte kliknúť na kovové disky, ale najprv uvedte masku do kvapalného skupenstva. Čas aktivácie bol pravdepodobne spôsobený hrboľatom dopravou a patrí k špecifickým vlastnostiam produktu.

2. Pri prvom použítií masky na oči sa niekedy môže stať, že kovové disky budete musieť nechať viac razy kliknúť. Toto kliknutie sa podarí dosiahnuť nasledovne: Chytte kovový disk obom rukami pomocou palca a ukazováka a ohýbajte ho zlžáka sem a tam, kým nepočujete kliknutie. Pokračujte v tom dovedy, kým sa maska na oči zaktívuje. Pri druhom a ďalšom použítiu postačuje spravidla jednorazové kliknutie na každej strane.

3. Teplota okolia má cítelný vplyv na teplotu masky na oči. Je v miestnosti, v ktorej by ste chceli použiť POSIFORLID® maska na oči, chladno? Alebo POSIFORLID® maska na oči ležala na chladnej ploche? Potom sa môže stať, že sama maska na oči sa ochladí skôr, alebo to tráv trochu dlhšie, kým sa dobre prehreje. Potom zohrejte masku na oči pred aktiváciou len krátko (cca 1 minútu) pod kohútikom s teplou vodou alebo tak, že ju položíte na niekoľko minút na ústredné kúrenie. Maska na oči potom ostane dlhšie teplá. To je zvlášť príjemné pre oči.

4. Maska na oči ostane dlhšie teplá, ak ju po aktivácii krátko pomasírujete, kým nezmäkne a stane sa ohýbatelnou. Okrem toho vyvoláva príjemnejší pocit na tvári.

5. V prípade, ak máte pocit, že maska je príliš teplá na citlivý pokožku okolo vašich očí, počkajte niekoľko minút po aktivácii, kým maska mierne nevychladne a pocit tepla je vyhovujúci vašej pokožke.

6. AKO DLHO BY SA MAL POSIFORLID® MASKA NA OČI POUŽÍVAŤ?

Je dôležité si objasniť, že zápal okrajia viečok alebo funkčná porucha Meibomových žliaz sú chronické choroby, ktoré si vyžadujú dennú pozornosť. Preto si úspešná liečba zápalu okrajia viečok alebo funkčnej poruchy Meibomových žliaz vyžaduje po dlhšiu dobu pravidelnú aplikáciu pomôcky POSIFORLID® maska na oči. Dá sa to priroviť k tvorbe povlaku na zuboch. Povlak sa vytvára každú deň novovo - práve tak ako maz. Odstraňovaním plaku dva razy denne sa vyhnete problémom. To isté platí aj pre dvojnásobné denné čistenie vašich okrajov viečok po použítií pomôcky POSIFORLID® maska na oči. Ak prestanete používať teplú kompresnú masku a čistiť si viečka, vrátia sa vám ľahkosť späť.

Preto vám odporúčame, aby ste používanie pomôcky POSIFORLID® maska na oči začlenili do vašho trvalého denného programu.

7. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Pokiaľ je to známe, netreba očakávať žiadne nežiaduce účinky. Napriek tomu sa domnievate, že nebudeť znášať používanie pomôcky POSIFORLID® maska na oči, alebo že sa vás ľahkosť po niekoľkých dňoch zhorskia? Potom sa skontaktejte so svojím lekárom.

8. KTORÉ POKYNY K UCHOVÁVANIU POMÔCKY POSIFORLID® MASKA NA OČI MUSÍTE DODRŽIAVAT?

Uchovávajte POSIFORLID® masku na oči mimo dohľad a dosahu detí. Uchovávajte POSIFORLID®

maska na oči pri teplote 15-35 °C (15 °C). Nepoužívajte pomôcku POSIFORLID® po dátume expirácie. Dátum expirácie nájdete na škatuli uvedenú po symbolu presýpacích hodín (🕒). Je tam uvedený mesiac a rok. Posledný deň v mesiaci je konečný deň uchovateľnosti.

9. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

POSIFORLID® maska na oči je gélová maska, ktorá obsahuje dva kovové disky a je vyrobená z PVC bez obsahu ftálátov a z roztoku solí vo vode (octan sodný). Neobsahuje latex.

Podľa nadobudnutého balenia obsahuje POSIFORLID® maska na oči jednu alebo dve masky na oči. Každá maska na oči sa môže použiť cca 90-krát.

Dátum poslednej revízie:
01/2019

Distribúcia v Čechách:
URSAPHARM spol. s.r.o.
Kubánske námestí 1391/11
100 00 Praha 10
Tel.: +420 295 560 468
e-mail: info@ursapharm.cz
www.ursapharm.cz

Distribúcia na Slovensku:
URSAPHARM spol. s.r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
telefon: 0911 902 509
e-mail: info@ursapharm.cz
www.ursapharm.sk

Distribúcia v Poľsku:
URSAPHARM Poland sp. z o.o.
ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki
Tel: 22 732 07 90, Faks: 22 732 07 99
e-mail: info@ursapharm.pl
www.ursapharm.pl

Výrobca (🕒):
STANPHARMA B.V., Mgr. van Genkstraat 6,
4813 BL Breda, Holandsko

CE zdravotnícka pomôcka

Váš názor na naš výrobok je pre nás dôležitý!
Tešíme sa na váš názor vo forme listu alebo e-mailu.

PL

Instrukcia užívania Naleží prečítať uvaženie instrukcie užívania, pretože záverečná informácia na masecku je významná.

Zachovať instrukciu užívania, aby v rade potreby ponovne prečítať jej treść. Zvrchnosť sú do lekarza lub farmaceutu, ktorí potrebujú poradu alebo dodatkovú informáciu. W razie nasilenia objavov lub braku poprawy naleží koniecznie zvraciť sa do lekarza.

POSIFORLID® Maseczka na oczy

Samoczynnie rozgrzewająca się maseczka na oczy do leczenia zapalenia brzegów powiek (blepharitis), dysfunkcji gruczołów w krawędzi powieki (gruczoly Meiboma), jęzczmienia i gradówka. Maseczka na oczy POSIFORLID® zapewnia szybką i długotrwałą ulgę przy dolegliwościach spowodowanych niestabilnością filmu łzowego, np. przy zespole suchego oka, zmęczonych, piekących lub nadmiernie łzawiących oczach.

1. W JAKIM CELU STOSOWANA JEST MASECZKA NA OCZY POSIFORLID®?

Maseczka na oczy POSIFORLID® stosowana jest wspomagająco w leczeniu zapalenia brzegów powiek (blepharitis), dysfunkcji gruczołów Meiboma, jęzczmienia i gradówka. Maseczka aktywuje się do pomocą prostego systemu zgięcia metalowej płytki. Po upływie około 1 minuty uzyskuje ustaloną temperaturę. Ciepło zmiękcza strupki na brzegu powieki, ułatwiając ich usuwanie. Ponadto ciepło poprawia ukrwienie i uelastyczność tóz w gruczołach Meiboma, w wyniku czego podczas masowania powiek można go wycisnąć z gruczołów łojowych. Maseczka na oczy POSIFORLID® w naturalny sposób zapewnia szybką i długotrwałą ulgę przy dolegliwościach spowodowanych niestabilnością filmu łzowego, np. przy zespole suchego oka, zmęczonych, piekących lub nadmiernie łzawiących oczach.

Objawami zespołu suchego oka mogą być:

- Podrażnenie oczu
- Zaczernienie oczu
- Uczucie kłucia w oczach lub pieczenia
- Uczucie piasku w oczach
- Świastowstręt
- Zmienna zdolność widzenia (po kilkukrotnym mrugnięciu powiek widzenie poprawia się na jakiś czas)
- Pogorszenie dolegliwości w określonych pomieszczeniach, np. klimatyzowanych lub zadyminnych
- Dyskomfort podczas czytania lub wpatrzywania się przez dłuższy czas w ekran/monitor
- Niewyraźne widzenie podczas jazdy nocą
- Uczucie suchych, zmęczonych, piekących oczu
- Trudność z noszeniem soczewek kontaktowych
- Dolegliwości związane z łzieniem lub nadmiernie łzawiącymi oczami. W przypadku suchych oczu zdarza się to rzadko, ale gdy film łzowy odparuje zbyt szybko, oczy reagują produkcją nowych łez, dokładnie jak np. podczas jazdy na rowerze.

2. KIEDY NIE UŻYWAĆ MASECZKI NA OCZY POSIFORLID® LUB KIEDY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNU OSTROŻNOŚĆ?

- W pewnych formach egzem: Wilgotne ciepło może pogorszyć niektóre formy egzemu. Jeśli dolegliwości związane z egzemą ulegną pogorszeniu, zalecamy, aby zgłosić się do lekarza.
- Przy podwyższonym ciśnieniu śródgałkowym (jaszka) nie wolno wywierać zbyt dużego nacisku na oczy. Elastyczny zapięcie w tym przypadku nie należy zaciągać zbyt mocno lub wystarczy położyć maseczkę na oczy bez stosowania elastycznego zapięcia.
- W przypadku operacji jaszków lub zaćmy przed kilkoma miesiącami należy zachować ostrożność podczas masowania górnej powieki. Przed użyciem maseczki na oczy POSIFORLID® należy skonsultować się z okulistą.
- Nie należy stosować maseczki POSIFORLID®, jeśli jest nieszczelna lub uszkodzona.

Po około 90 cyklach użycia działanie maseczki zmniejsza się. Aby skutecznie zwalczać dolegliwości, wymagana jest odpowiednia temperatura. Jeśli maseczka emituje mniej ciepła, należy wymienić ją na nową.

Prosimy stosować maseczkę na oczy POSIFORLID® wyłącznie do opisanego zastosowania. Czy dolegliwości po kilku dniach ulegają pogorszeniu? Jeśli tak, skonsultuj się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ I PIELĘGNOWAĆ MASECZKĘ NA OCZY POSIFORLID®?

Maseczki na oczy POSIFORLID® należy używać zawsze dokładnie tak, jak jest to opisane poniżej. Maseczka na oczy jest gotowa do użycia, jeśli jej pomarańczowa zawartość jest płynna. Jeśli zawartość ma jeszcze stałą konsystencję, należy wyjąć maseczkę na oczy z osłonki po otwarciu zatrzasku i wygotować przez 10 minut.

i

Prosimy stosować się do instrukcji w punkcie „Wygotowywanie po użyciu“.

Maseczkę na oczy stosować w połączeniu z płatkami kosmetycznymi, które można zakupić w supermarketie lub drogerii. Do każdego zabiegów należy używać nowych i czystych płatków kosmetycznych.

Przed zastosowaniem

Przed przystąpieniem do zastosowania zgodnie z punktem 4 należy wykonać następujące czynności:

- Umyj ręce.
- Sprawdź, czy maseczka na oczy nie wykazuje uszkodzeń lub oznak nieszczelności.
- Przed użyciem maseczki na oczy POSIFORLID® należy wyjąć soczewki kontaktowe i zmyć makijaż.

4. ZASTOSOWANIE

Należy zwiększyć dwa płatki kosmetyczne normalną wodą z kranu. Wsunąć z każdej strony wilgotny płatek kosmetyczny na górze maseczki w otwór tak, aby wata dokładnie przylegała do owalnych okienek. Zapiąć zatrzask na maseczce na oczy.

Uaktywnić maseczkę za pomocą systemu zgięcia metalowej płytki. Proces zgięcia przebiega w następujący sposób: W obu pomarańczowych odcinkach maseczki na oczy znajduje się metalowa płytki. Należy przytrzymać każdą płytę obiema rękami i spróbować ją wgiąć lub zgiąć. Proces zgięcia wywołuje fale dźwiękowe, pod wpływem których płynna pomarańczowa zawartość maseczki w ciągu kilku sekund przyjmuje stałą postać, tworząc ciepło. Temperatura wynosi około 45°C. Po ok. 5-7 minutach ciepło stopniowo słabnie.

Położyć maseczkę otwartą stroną na oczy i złożyć ją tasiemką na głowę. Za pomocą zapięcia można odpowiednio skrócić tasiemkę. Nie naciągać zbyt mocno; nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na oczy.

Po około 5 minutach ściągnąć maseczkę. Okres ten można wydłużyć, jednak nie należy go skracić.

Czyszczenie powiek to ważna czynność podczas leczenia stanów zapalnych brzegów powiek oraz dysfunkcji gruczołów Meiboma. Wyjąć płatki kosmetyczne z maseczki, a następnie pomasować i oczyścić nimi brzegi powiek z rzędami, pocierając lekko płatkami kosmetycznymi między rzędami. Aby wywierać nacisk na dolną powiekę, należy spojrzeć w góry, natomiast aby przesunąć górną powiekę, spojrzeć w dół. Położyć palec wskazujący równolegle do brzegu powieki blisko rzęs. Wywierać nacisk na dolne powieki w kierunku oka. W ten sposób usuwa się tóz, w wyniku czego stabilizuje się film łzowy i łagodnią dolegliwość.

W przypadku gradówka pomasować zmienione chorobowo miejsce bezpośrednio po zastosowaniu maseczki. Pod wpływem ciepła tóz stanie się płynny. Podczas masowania wycisnąć powoli ciekły tóz w małych ilościach z zaczepowanego gruczołu łojowego. Dzięki temu zgubienie powoli zniknie. Jęzczmienia na powieckach nie należy masować. Ciepło emitowane przez maseczkę przyspieszy dojrzewanie jęzczmienia. Gdy grudka pęknie, ustąpią dolegliwości. Najczęściej znika po kilku dniach. Może się jednak również zdarzyć, że zgubienie pozostanie, ale tóz nie będzie już odczuwalny. Ulegnie ono zasklepieniu i przejdzie w gradówkę.

Wygotowywanie po użyciu
Po użyciu maseczkę należy wygotować przez 10 minut w garnku w dużej ilości wody (ok. 2 litry), aby przygotować ją do kolejnego użycia. Zawartość maseczki będzie znów płynna. Czas wygotowywania należy mierzyć dopiero od faktycznego zagotowania wody. Woda powinna gotować się na wolnym ogniu, a więc nie wyłączać źródła ciepła. Unikać gotowania w małej ilości wody i uszkodzenia: Kontrolować czas gotowania za pomocą minutnika kuchennego. Do wkładania maseczki do wody lub wyjmowania jej z wody użyć łyżki cedzowej lub dużej łyżki. Nie wygotowywać maseczki razem z osłoną, ponieważ w przeciwnym razie materiał stanie się twardy.

Wygotowywanie po użyciu
Po użyciu maseczkę należy wygotować przez 10 minut w garnku w dużej ilości wody (ok. 2 litry), aby przygotować ją do kolejnego użycia. Zawartość maseczki będzie znów płynna. Czas wygotowywania należy mierzyć dopiero od faktycznego zagotowania wody. Woda powinna gotować się na wolnym ogniu, a więc nie wyłączać źródła ciepła. Unikać gotowania w małej ilości wody i uszkodzenia: Kontrolować czas gotowania za pomocą minutnika kuchennego. Do wkładania maseczki do wody lub wyjmowania jej z wody użyć łyżki cedzowej lub dużej łyżki. Nie wygotowywać maseczki razem z osłoną, ponieważ w przeciwnym razie materiał stanie się twardy.

Osłonę można wyczyścić letnim roztworem wody z mydłem.

Czego należy unikać

- Nie używać maseczki bezpośrednio po wygotowaniu. Maseczka jest wówczas zbyt gorąca i mogłyby spowodować poparzenie. Odczekać co najmniej jedną godzinę, aż maseczka dostarczy ostygnie.
- Nie rozgrzewać maseczki w kuchence mikrofalowej ani bezpośrednio na płycie grzejnej.
- Nie wyciągać maseczki z garnka ostrym przedmiotem; mogłyby przez to ulec uszkodzeniu. Lepiej użyć do tego celu łyżki cedzowej lub dużej łyżki.
- Nie zezwalać dzieciom na wygotowywanie maseczki bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie należy stosować maseczki POSIFORLID®, jeśli jest nieszczelna lub uszkodzona. Jeśli pomarańczowa zawartość dostanie się przypadkowo do oczu lub na skórę bądź odzież, należy spłukać ją przez kilka minut pod letnią bieżącą wodą.

5. JAKICH INNYCH WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ?

Chętnie udzielimy jeszcze kilku wskazówek dotyczących używania:

- 1. Może się zdarzyć, że po pierwszym rozpakowaniu maseczki będzie ona twarda. W takim przypadku nie należy próbować wyginać metalowej płytki tylko doprowadzić maseczkę do stanu płynnego poprzez wygotowanie jej w wodzie. Do jej przypadkowej akty